


## AME EPS

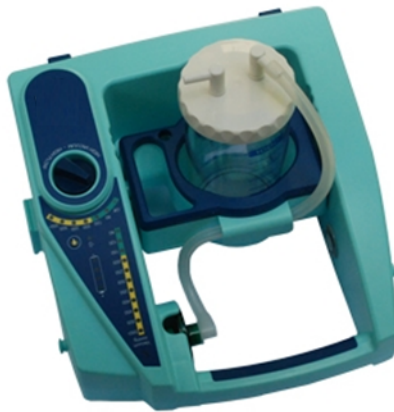

## UNIDAD DE SUCCIÓN PORTÁTIL MULTIPOTENCIADA

La unidad de succión portátil AME e.p.s ofrece un nuevo punto de referencia en equipos de succión a batería.

La unidad liviana es ideal para ser utilizada por los servicios de emergencia e incorpora muchas características nuevas que incluyen una bomba de bajo consumo de energía de alto rendimiento, acumulación rápida de succión, iluminación a bordo y un sistema de botella giratoria único que permite colocar la unidad plana en terrenos difíciles.

La unidad está equipada con un cargador interno y proporciona un rendimiento confiable tanto dentro como fuera del entorno hospitalario, lo que brinda hasta 120 minutos de uso continuo a plena potencia entre cargas y más de 10 horas a niveles de succión más bajos.

El AME e.p.s. La unidad ha sido diseñada específicamente tras consultas con médicos, paramédicos y personal médico.

La unidad es adecuada para su uso en ambulancias, salas de hospitales generales, unidades de cuidados críticos, clínicas y en la comunidad.

La unidad se suministra con un recipiente colector de 1 litro esterilizable en autoclave con válvula de corte de seguridad, filtro hidrófobo y antibacteriano desechable y catéter y tubos desechables. También se puede suministrar / equipar con la mayoría de los sistemas de revestimiento desechables si es necesario

Fuente de alimentación interna multi-alimentada 12 - 28 V DC  $\pm$  10% y 100 - 230  $\pm$  10% V AC 50 / 60Hz. Nivel de ruido - 46dB al máximo, <30dB al mínimo.

La unidad tiene almacenamiento a bordo para catéteres y tubos de succión.

\*\*\* Tenga en cuenta que la cubierta flexible (AME1431) no está incluida en el AME e.p.s. precio y es accesorio adicional \*\*\*